

製品仕様	
モード	Transcend AUTO: オートCPAP、固定CPAP Transcend EZEX: 固定CPAP
圧力設定範囲	4~20cmH ₂ O (±1cmH ₂ Oまたは±10%の何れか大きい方)
EZEX機能	OFF、1~3(3段階で設定)
最大システム停止圧	30cmH ₂ O
ランプ時間	0~45分 ±25%(変動値)
データ記録量	AHI および リーク、総使用時間、総作動時間 使用時間 ≥8時間、6時間、4時間 (13ヶ月分のデータ記録が可能)
作動音	26.6dB
電源	AC100V~240V 50/60Hz (AC電源サプライPSA1:入力) DC19V 2.6Amp (AC電源サプライPSA1:出力)
電気安全性	EN60601-01 クラスII/BF形装着部
温度条件	使用時: 5~35℃ 輸送及び保管時: -20~+60℃
湿度条件	使用時: 10~80%(相対湿度、結露なし) 輸送及び保管時: 10~90%(相対湿度、結露なし)
作動高度	0~2438m (0~8000ft)
薬事承認番号	トランセンドCPAPシリーズ: 22500BZX00479000

品名	P/N	標準価格	JANコード
トランセンドAUTO	503065	¥168,000	4582244694185
【オプション】			
トランセンド用加湿加湿器	503064	¥75,000	4582244694192
バッテリー BAT4	503026	¥36,000	4582244693355
バッテリー BAT8	503023	¥44,000	4582244693362



Sleep innovations.



P
MEDICO

旅行や出張先で快適な睡眠生活を実現

HEAD SET KIT

オプションのヘッドセット用キットを使用し、Transcend本体を頭部に装着することができます。

- 圧ラインがマスク内の圧力をモニターし供給圧を維持します。
- 頭部に触れるパッドは着け心地が快適です。ディスプレイで交換が簡単。
- コンパクトでシンプルな加湿フィルタを採用。

※ヘッドセットキットをご使用の際は、マスククッション(コンフォートジェルブルーフラップ/クッション)をご購入ください。



品名	P/N	標準価格	JANコード
【オプション】			
ヘッドセット用キット	303006	¥13,200	4582244693348
コンフォートジェルブルーフラップ/クッションS	1079239	¥5,700	4582214258058
コンフォートジェルブルーフラップ/クッションM	1079238	¥5,700	4582214258041
コンフォートジェルブルーフラップ/クッションL	1079237	¥5,700	4582214258034

- 外観、仕様改良のため予告なく変更される場合がございますのでご了承ください。
- カタログに記載の価格には、消費税が含まれておりません。別途消費税を申し受けます。

お出かけ先でも継続して快適なCPAP療法を実現!

- 世界最小・最軽量*のCPAP(0.43kg)。*2014年9月現在
- 日本のエアベアリング技術の採用により、発熱、振動、作動音を大幅に軽減。
- バッテリー駆動が可能(オプション)。
- ベッドサイドにおいて使用する他に、頭部に直接装着して使用が可能。
- 本体と完全に統合された、省スペースの一体型加湿加湿器(オプション)。



TRANSCEND EZEX



TRANSCEND AUTO + P4 Battery(Optional)

Somnetics

販売元
株式会社 MAGnet
〒162-0053 東京都新宿区原町3丁目19 ラーズビル
TEL: 03-5291-7188 FAX: 03-3202-5789
www.magnet-japan.com

製造販売業者
パシフィックメディコ 株式会社
〒113-0033 東京都文京区本郷2-6-4
Phone: 03-5844-3507 Fax: 03-5844-3508
www.pacific-medico.com

Sleep innovations.

TRANSCEND AUTO EZEX

超小型・軽量のTranscend CPAPに、さらに快適性を高めた機能を追加しました。
新たにオートCPAPモードを搭載したTranscend AUTOに加え、固定CPAPモードのみのTranscend EZEXの2機種をラインナップ。いずれも3段階で調節可能な圧リリーフ機能「EZEX」を搭載し、睡眠中の呼吸をやさしくサポートします。また、オプションに専用加温加湿器を追加し、季節を問わず快適なCPAP療法を行うことができます。


APAP mode ▶ オートCPAP

Transcend AUTOの『APAPモード』は、ユーザの呼吸状態を常にモニタリングし、自動的にCPAP圧の調整を行います。無呼吸・低呼吸・フローリミテーション・いびきに対して、呼吸イベントが発生しない最低限の圧を供給します。通常の『リアクティブモード』と、呼吸が安定し圧が低下したときにイベントに対する反応を速くする『プロアクティブモード』の2つのモードを自動的に使い分けます。



EZEX ▶ イージーエックス: 呼吸中の圧リリーフ機能

『EZEX』はTranscend AUTO/EZEXに搭載された圧リリーフ機能です。吸気から呼気に切り替わる際に供給圧を下げるので、CPAP圧が高い場合でも息をはきやすくし、吸気開始までに徐々に供給圧を上げます。『EZEX』は、ユーザが任意で3段階の設定することで、快適な圧リリーフレベルを調整することができます。

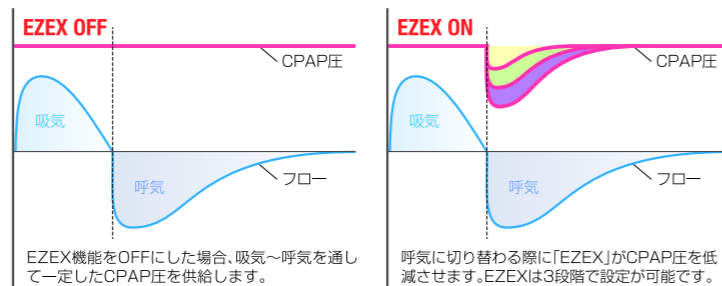

Data Management ▶ コンプライアンスデータ管理

Transcendは本体に最大13ヶ月分のCPAP使用中のコンプライアンスデータを蓄積します。専用解析ソフトは、ユーザ用メニューと医療従事者用メニューがあります。ユーザ用メニューでは、ユーザ自身がコンプライアンスデータの確認するとともに、データをEメールで医師へ送信する機能を備えています。



OPTION

▶ 専用バッテリー

移動中など、電源の確保が困難な環境下でもTRANSCENDを使用できる、コンパクトサイズの携帯用バッテリーです。1日使用タイプ(駆動時間:約6~8時間)と2日使用タイプ(駆動時間:約14~16時間)の2種類を用意しています。

▶ 専用加温加湿器

Transcendを上部にマウントして使用できる一体型加温加湿器です。CPAPからの送気を適切に加温加湿し、より快適な治療を行えます。加温加湿を併用してもなお、超小型で場所をとりません。



▶ P4バッテリー (バッテリー BAT4) 1日使用タイプ。駆動時間:約6~8時間

▶ P8バッテリー (バッテリー BAT8) 2日使用タイプ。駆動時間:約14~16時間

